


Instructions for Use (IFU) Microbrush Applicators

INTENDED USE:

Microbrush Applicators are single use medical devices that are intended for use in a dental environment. Applicators are utilized during various types of dental procedures for the application of a controlled amount of material in areas of difficult access within the oral cavity.


Microbrush (Ultrafine Size, Superfine Size, Fine Size and Regular Size)

The Microbrush takes the form of a plastic handle composed of proprietary combination of resins and colorants. Feature characteristics of the handle include a break-off portion for user preference, ribbed gripping portion for improved user grip, and a bending portion for access to tight spaces and enhanced ergonomics. The tip of the brush includes various sizes of non-absorbent nylon flocking adhered to a spherical tip to apply various dental products. The Microbrush may be used for applying and removing materials such as resins, cements, etchants, bonding agents, fluoride, hemostatic solutions and conditioners.

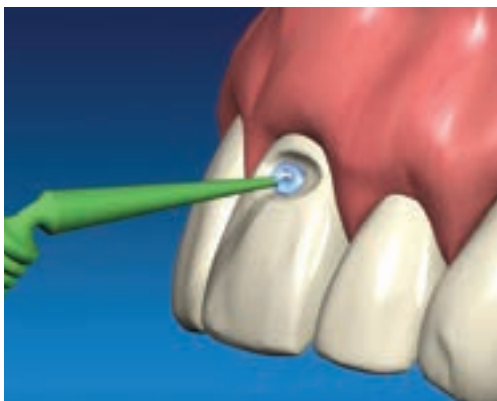



Microbrush Original (Superfine Size, Fine Size and Regular Size)

The Microbrush Original takes the same form as the Microbrush listed above. The only differentiation from the standard Microbrush is the handle does not include a break-off portion. The Microbrush Original may be used for applying and removing materials such as resins, cements, etchants, bonding agents, fluoride, hemostatic solutions and conditioners.

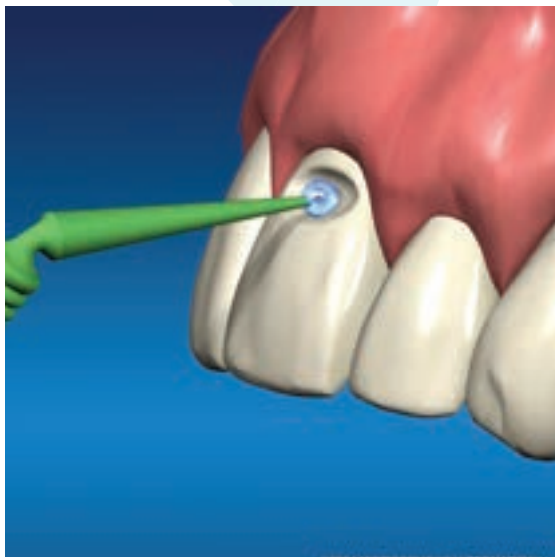

Microbrush X

The Microbrush X takes the same form as the Microbrush listed above. The only differentiation from the standard Microbrush is that the nylon fibers are adhered extending further down the length of the tip for extended reach applications. The Microbrush X is intended for use in bonding posts, inlay/onlay cementation, and perio/subgingival areas.

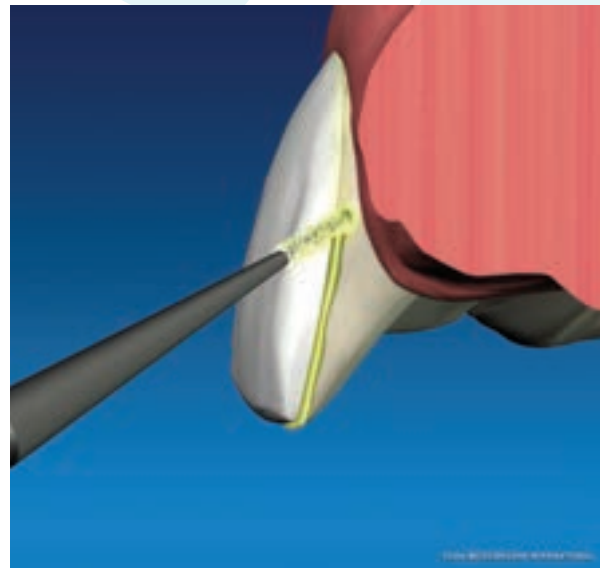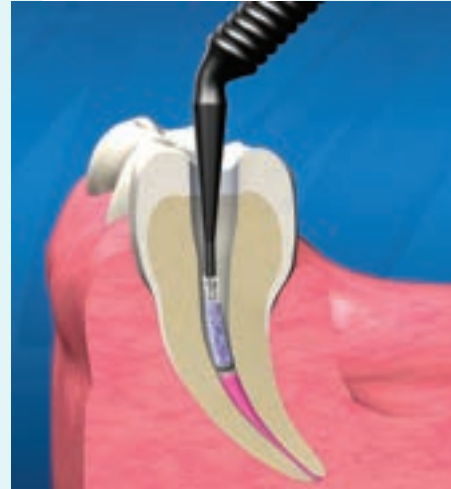


UltraBrush (Bristle Brushes)

The UltraBrush is a plastic handled applicator composed of proprietary combination of resins and colorants. Feature characteristics of the handle include a break-off portion for user preference, a bending portion for access to tight spaces, and enhanced ergonomics. The tip of the brush is constructed with nylon bristles to apply dental products such as whitening agents, fluoride, etchants, bonding agents, sealants, desensitizers, and resins.



Dispenser

The device is packaged in groups and dispensed individually from one sealed.

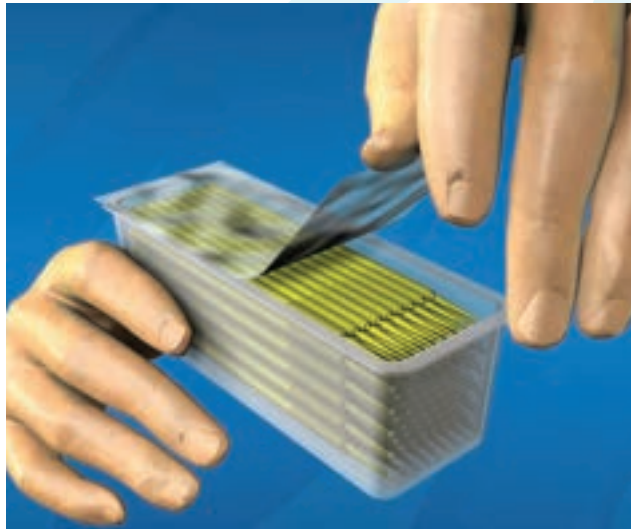

Safe Disposal

There are no precautions to be taken against any special, unusual risk related to the disposal of the device. Disposal for local regulations could be done through the general dental waste. This device does not require any unusual storage conditions.

Caution

Microbrush Applicators are designed as a single-use product, should an Applicator be used more than once it is possible the performance of the device may deteriorate. More importantly, the reuse of an Applicator may result in the introduction of microbes into the body due to reuse of the Applicator which may have been contaminated during its first use, which can result in subsequent deterioration in the health of the patient.

This is a disposable product. Dispose of properly after one use. If a single-use product is reused, the device cleaning, decontamination, sterilization or lack thereof can result in cross-infection, alternations, and/or degradations of device material and mechanical function, and the absorption and leaching of cleaning agents or decontaminants.

Warnings and Precautions

This device can be used safely without special warnings or precautions, taking account of the training and knowledge of potential users.

Contraindications:

None.

Report any serious injury in relation to this device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the incident occurred.

For professional use only. Not available to the general public.

REF	MRG400 MRB400 MRS400 MRP400 MFP400 MFY400 MSF400 MUT400	MUO400 MFA400 MPD MPX MRA400 PF100PI PF100YE PR100BL	PR100GR PR100PE PR100PU PSF100 PF400 PF400-KIT PF400PI PF400YE	PR400 PR400BL PR400GR PR400-KIT PR400PE PR400PU PSF400 PSF400-KIT	PU400OR PU400TE PX100 WMFP100 WMFP100-S WMFY100 WMFY100-S WMRB100	WMRB100-S WMRPU100 WMRPU100-S WMSF100 WMSF100-S U1D U2D	U1R200 U2R200 292724 292725
-----	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

 Microbrush® International
1376 Cheyenne Ave
Grafton, WI 53024 USA

www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Made in the USA



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau Switzerland



UK Responsible Person
MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Manchester M22 4DB
United Kingdom



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



Medical Device



Single Use Only

8455.3
2026.01.31


Gebruiksaanwijzing voor Microborstel-applicators

BEOOGD GEBRUIK:

Microbrush-applicators zijn medische apparaten voor eenmalig gebruik die bedoeld zijn voor gebruik in een tandheelkundige omgeving. Applicators worden gebruikt bij diverse tandheelkundige behandelingen om een gecontroleerde hoeveelheid materiaal aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen in de mondholte.


Microborstel (ultrafijne maat, superfijne maat, fijne maat en normale maat)

De Microbrush heeft de vorm van een plastic handgreep dat is samengesteld uit een propriëtaire combinatie van harsen en kleurstoffen. Kenmerken van de handgreep zijn onder meer een afbreekpunt naar voorkeur van de gebruiker, een geribbeld oppervlak voor betere grip en een buiggedeelte voor toegang tot krappe ruimtes en verbeterde ergonomie. De tip van de borste bestaat uit niet-absorberende nylonvezels van verschillende afmetingen, die op een bolvormige tip zijn aangebracht voor het aanbrengen van diverse tandheelkundige producten. De Microbrush kan worden gebruikt voor het aanbrengen en verwijderen van materialen zoals harsen, cementen, etsmiddelen, hechtmiddelen, fluoride, hemostatische oplossingen en conditioners.

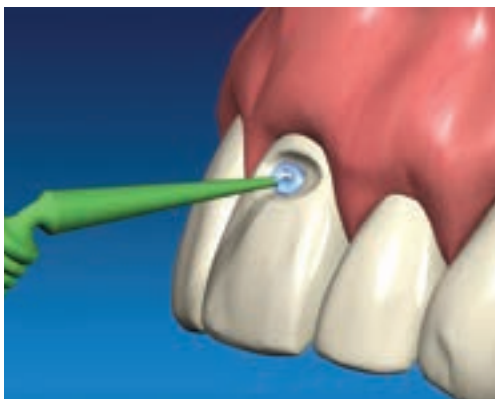



Microbrush Original (superfijne maat, fijne maat en normale maat)

De Microbrush Original heeft dezelfde vorm als de Microbrush hierboven. Het enige verschil met de standaard Microbrush is dat de handgreep geen afbreekpunt heeft. De Microbrush Original kan worden gebruikt voor het aanbrengen en verwijderen van materialen zoals harsen, cementen, etsmiddelen, hechtmiddelen, fluoride, hemostatische oplossingen en conditioners.

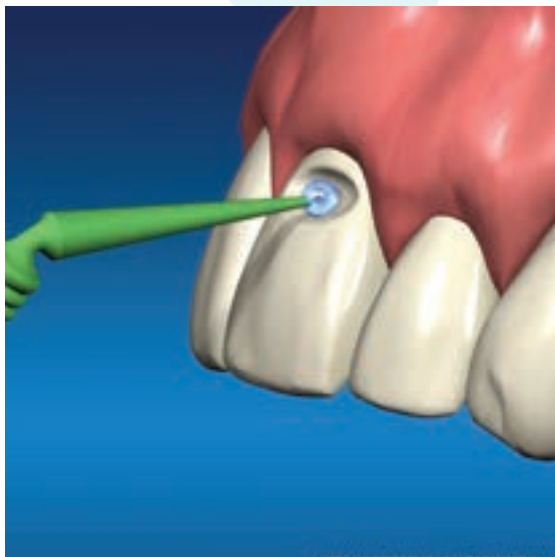

Microbrush X

De Microbrush X heeft dezelfde vorm als de Microbrush hierboven. Het enige verschil met de standaard Microbrush is dat de nylonvezels over de hele lengte van de tip zijn vastgehecht voor toepassingen met een groter bereik. De Microbrush X is bedoeld voor het vastzetten van stiften, het cementeren van inlays en onlays, en voor gebruik in parodontale of subgingivale gebieden.

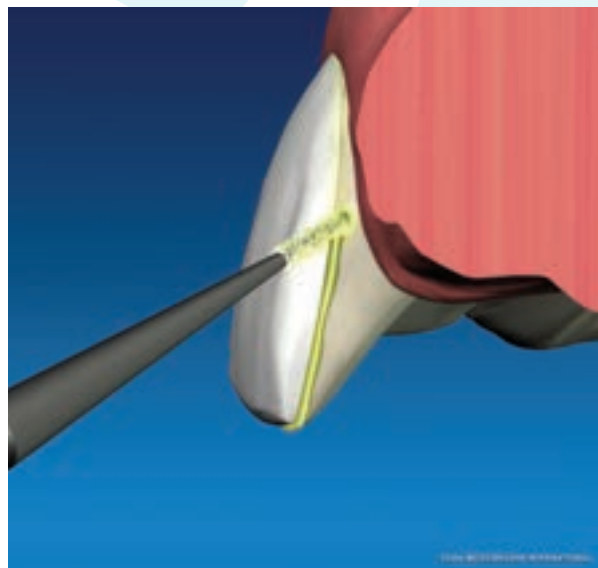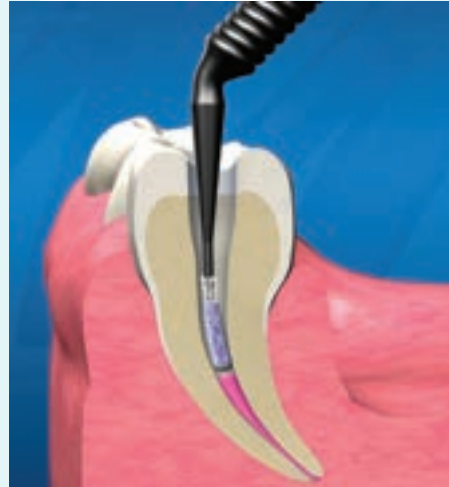

UltraBrush (borstels)

De UltraBrush is een applicator met plastic handgreep die is samengesteld uit een propriëtaire combinatie van harsen en kleurstoffen. De handgreep is voorzien van kenmerken zoals een afbreekpunt naar voorkeur van de gebruiker, een buiggedeelte voor betere toegang tot krappe ruimtes en een ergonomisch ontwerp. De tip van de borstel is gemaakt van nylon borstelharen om tandheelkundige producten aan te brengen, zoals witmakers, fluoride, etsmiddelen, bindmiddelen, afdichtmiddelen, desensibilisatoren en harsen.



Dispenser

Het apparaat wordt per groep verpakt en afzonderlijk uit een afgesloten verpakking verstrekt.



Veilige verwijdering

Er hoeven geen speciale voorzorgsmaatregelen te worden genomen tegen ongebruikelijke risico's bij het verwijderen van het apparaat. Verwijdering volgens de lokale regelgeving kan plaatsvinden via het algemene tandheelkundige afval. Dit apparaat vereist geen ongebruikelijke opslagcondities.

Caution

Microbrush-applicators zijn ontworpen voor eenmalig gebruik. Wanneer een applicator vaker dan één keer wordt gebruikt, kan de werking ervan verslechteren. Nog belangrijker is dat het opnieuw gebruiken van een applicator kan leiden tot de introductie van microben in het lichaam doordat de applicator, die mogelijk besmet was tijdens het eerste gebruik, opnieuw wordt gebruikt. Dit kan leiden tot een verslechtering van de gezondheid van de patiënt.

Dit is een wegwerpproduct. Verwijder na één gebruik op de voorschreven manier. Wanneer een product voor eenmalig gebruik opnieuw wordt gebruikt, kan het ontbreken van of de onjuiste reiniging, decontaminatie of sterilisatie leiden tot kruisbesmetting, afwijkingen en/of degradatie van het materiaal en de mechanische werking van het apparaat, evenals de absorptie en uitloging van reinigings- of decontaminatiemiddelen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Dit apparaat kan veilig worden gebruikt zonder speciale waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen, mits rekening wordt gehouden met de opleiding en kennis van de potentiële gebruikers.

Contra-indicaties:

Geen.

Meld elk ernstig letsel in verband met dit apparaat aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden.

Alleen voor professioneel gebruik. Niet beschikbaar voor het algemeen publiek.

REF	MRG400 MRB400 MRS400 MRP400 MFP400 MFY400 MSF400 MUT400	MUO400 MFA400 MPD MPX MRA400 PF100PI PF100YE PR100BL	PR100GR PR100PE PR100PU PSF100 PF400 PF400-KIT PF400PI PF400YE	PR400 PR400BL PR400GR PR400-KIT PR400PE PR400PU PSF400 PSF400-KIT	PU400OR PU400TE PX100 WMFP100 WMFP100-S WMFY100 WMFY100-S WMRB100	WMRB100-S WMRPU100 WMRPU100-S WMSF100 WMSF100-S U1D U2D	U1R200 U2R200 292724 292725
-----	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

 Microbrush® International
1376 Cheyenne Ave
Grafton, WI 53024 USA

www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Vervaardigd in de
Verenigde Staten



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau Switzerland



Verantwoordelijke persoon in het
Verenigd Koninkrijk
MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Manchester M22 4DB
United Kingdom



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland



Medisch apparaat



Uitsluitend voor eenmalig gebruik

8455.3
2026.01.31


Instructions d'utilisation (IDU) pour les applicateurs Microbrush

UTILISATION PRÉVUE :

Les applicateurs Microbrush sont des dispositifs médicaux à usage unique, destinés à être utilisés dans le domaine dentaire. Les applicateurs sont utilisés au cours de nombreuses procédures dentaires pour l'application d'une quantité contrôlée de matériau dans des zones de la cavité buccale difficiles d'accès.


Microbrush (taille ultrafine, taille superfine, taille fine et taille normale)

Les applicateurs Microbrush se composent d'un manche en plastique fabriqué à base d'une combinaison exclusive de résines et de colorants. Les principales caractéristiques du manche sont une partie à rompre selon les préférences de l'utilisateur, une partie de préhension striée pour une prise en main améliorée ainsi qu'une partie coudée pour accéder aux espaces étroits et une meilleure ergonomie. La pointe de la brosse est disponible en plusieurs tailles de flocage en nylon non absorbant adhérent à une pointe sphérique permettant d'appliquer de nombreux produits dentaires. Les applicateurs Microbrush peuvent être utilisés pour appliquer et retirer des matières telles que des résines, des amalgames, des agents de mordantage, des agents de collage, du fluorure, des solutions hémostatiques et des conditionneurs.

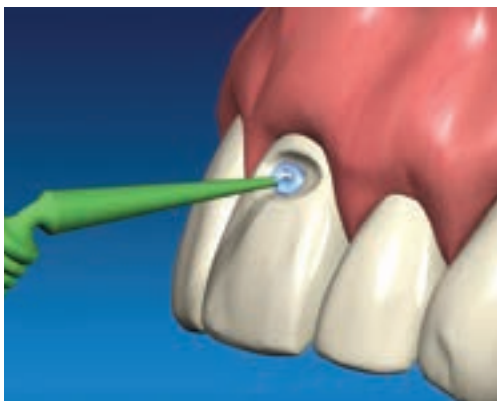




Microbrush Original (taille superfine, taille fine et taille normale)

Les applicateurs Microbrush Original ont la même apparence que les applicateurs Microbrush décrits ci-dessus. La seule différence est que le manche n'a pas de partie à rompre. Les applicateurs Microbrush Original peuvent être utilisés pour appliquer et retirer des matières telles que des résines, des amalgames, des agents de mordantage, des agents de collage, du fluorure, des solutions hémostatiques et des conditionneurs.

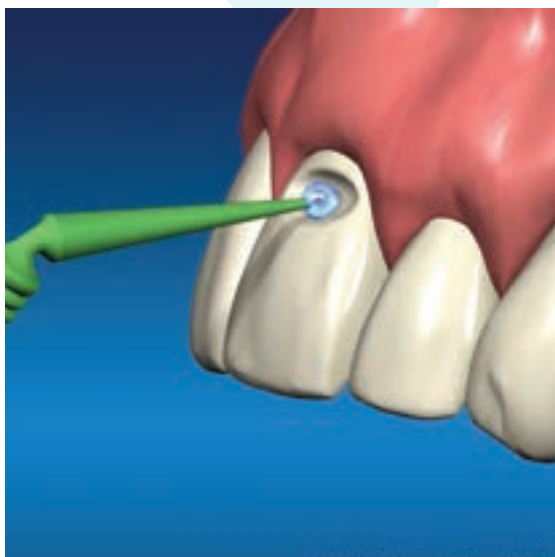

Microbrush X

Les applicateurs Microbrush X ont la même apparence que les applicateurs Microbrush décrits ci-dessus. La seule différence est que les fibres en nylon s'étendent plus sur la longueur de l'embout pour des applications à portée étendue. Les applicateurs Microbrush X sont destinés à être utilisés pour les liaisons de tenons, le scellement intrinsèque/extrinsèque et les zones péri/sous-gingivales.

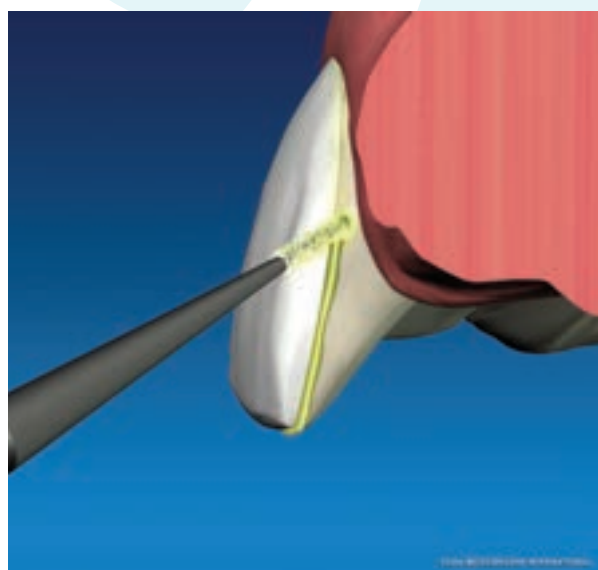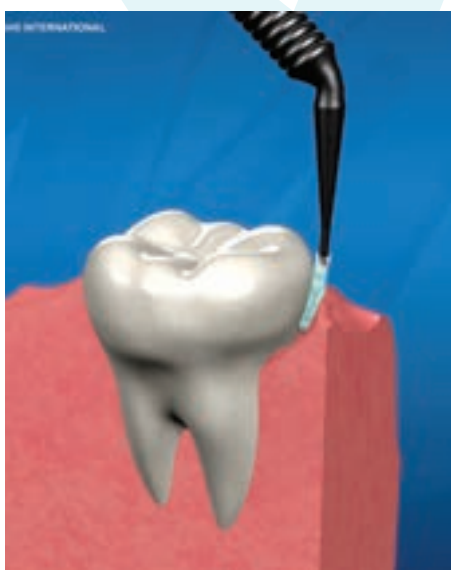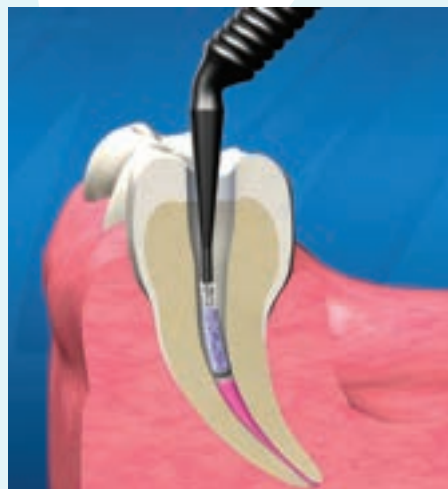

UltraBrush (brosses en soie)

Les applicateurs UltraBrush sont des applicateurs au manche en plastique fabriqué à base d'une combinaison exclusive de résines et de colorants. Les principales caractéristiques du manche sont une partie à rompre selon les préférences de l'utilisateur, une partie coudée pour accéder aux espaces étroits et une meilleure ergonomie. La pointe de la brosse se compose de poils en nylon pour appliquer des produits dentaires tels que des agents de blanchiment, du fluorure, des gels de mordantage, des agents de collage, des produits de scellement, des désensibilisants et des résines.



Distributeur

Les dispositifs médicaux sont emballés par lots dans un récipient hermétique et distribuer séparément.



Élimination sûre des déchets

Il n'y a aucune précaution à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à l'élimination de ces dispositifs médicaux. Selon la législation locale, ces dispositifs médicaux peuvent être jetés avec les autres déchets dentaires ordinaires. Ces dispositifs médicaux ne nécessitent aucune condition de conservation particulière.

Advertisement

Les applicateurs Microbrush sont des produits à usage unique. Si un applicateur est utilisé plusieurs fois, les performances du dispositif médical peuvent se dégrader. Plus important encore, si l'applicateur a été contaminé lors de la première utilisation, sa réutilisation peut entraîner l'introduction de microbes dans le corps et par la suite détériorer l'état de santé du patient.

Ceci est un produit jetable. Il doit être jeté après un seul usage conformément aux règles en vigueur. Si un dispositif médical à usage unique est réutilisé, le nettoyage, la décontamination ou la stérilisation du dispositif médical peut entraîner une infection croisée, des altérations et/ou une dégradation des matériaux ainsi qu'un dysfonctionnement du dispositif médical, et l'absorption et la lixiviation des agents de nettoyage ou des décontaminants.

Avertissements et précautions

Ce dispositif médical peut être utilisé en toute sécurité, sans précautions ou avertissements particuliers, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels.

Contre-indications :

Aucune.

Signalez toute blessure grave liée à ce dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit.

Réservé à un usage professionnel. Non disponible au grand public.

REF	MRG400 MRB400 MRS400 MRP400 MFP400 MFY400 MSF400 MUT400	MUO400 MFA400 MPD MPX MRA400 PF100PI PF100YE PR100BL	PR100GR PR100PE PR100PU PSF100 PF400 PF400-KIT PF400PI PF400YE	PR400 PR400BL PR400GR PR400-KIT PR400PE PR400PU PSF400 PSF400-KIT	PU400OR PU400TE PX100 WMFP100 WMFP100-S WMFY100 WMFY100-S WMRB100	WMRB100-S WMRP100 WMRP100-S WMSF100 WMSF100-S U1D U2D	U1R200 U2R200 292724 292725
-----	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

 Microbrush® International
1376 Cheyenne Ave
Grafton, WI 53024 USA
www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Fabriqué aux États-Unis 

EU REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany



CH REP
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau Switzerland

MD Dispositif médical

UK CA Responsable au Royaume-Uni
MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Manchester M22 4DB
United Kingdom

 Usage unique seulement

 Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland

8455.3
2026.01.31


Gebrauchsanleitung für Microbrush-Applikatoren

VERWENDUNGSZWECK:

Microbrush-Applikatoren sind medizinische Einwegprodukte, die für den Einsatz im zahnärztlichen Bereich vorgesehen sind. Applikatoren werden bei verschiedenen zahnärztlichen Verfahren eingesetzt, um eine genau dosierte Materialmenge in schwer zugänglichen Bereichen der Mundhöhle aufzutragen.


Microbrush (Spitzengrößen Ultrafine, Superfine, Fine und Regular)

Der Applikator Microbrush wird in Form eines Kunststoffgriffs aus einer firmeneigenen Kombination aus Harzen und Farbstoffen gefertigt. Hauptmerkmale des Griffs sind eine Sollbruchstelle zur individuellen Anpassung der Länge, ein geriffelter Bereich zur besseren Handhabung, ein biegsamer Teil für schwer zugängliche Stellen und verbesserte ergonomische Eigenschaften. An der Spitze des Applikators sind verschiedene Größen nicht saugfähiger Nylon-Flockfasern angebracht, die an einer kugelförmigen Spitze befestigt sind und zur Anwendung verschiedener Dentalprodukte dienen. Microbrush-Applikatoren können zur Anwendung und Entfernung von Materialien wie Kunstharzen, Zementen, Ätzmitteln, Adhäsiven, Fluorid, blutstillenden Lösungen und Konditioniermitteln verwendet werden.

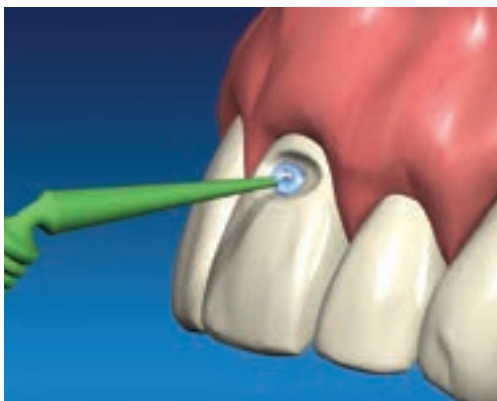



Microbrush Original (Spitzengrößen Superfine, Fine und Regular)

Microbrush Original hat die gleiche Form wie der oben aufgeführte Microbrush-Applikator. Der einzige Unterschied im Vergleich zum Standard-Microbrush-Stil besteht darin, dass der Griff keine Sollbruchstelle aufweist. Der Microbrush Original kann für die Anwendung und Entfernung von Materialien wie Kunstharzen, Zementen, Ätzmitteln, Adhäsiven, Fluorid, blutstillenden Lösungen und Konditionierern verwendet werden.

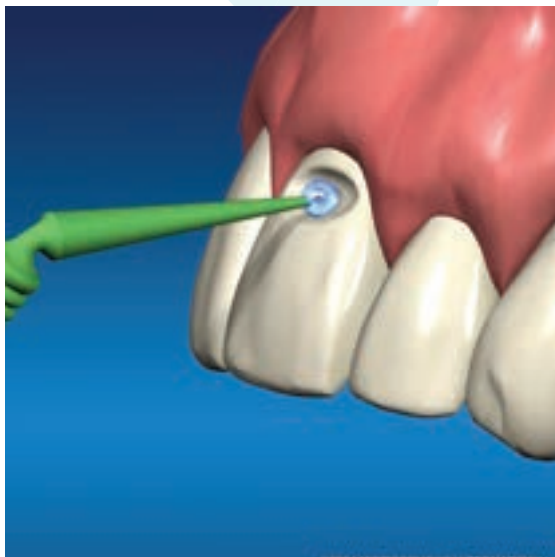

Microbrush X

Der Microbrush X entspricht in seiner Form dem oben aufgeführten Microbrush. Der einzige Unterschied zum Standard-Microbrush besteht darin, dass die Nylonfasern weiter unten an der Spitze angebracht sind, um eine größere Reichweite zu erzielen. Der Microbrush X ist für die Verklebung von Stiften, die Inlay-/Onlay-Zementierung und parodontale/subgingivale Bereiche vorgesehen.

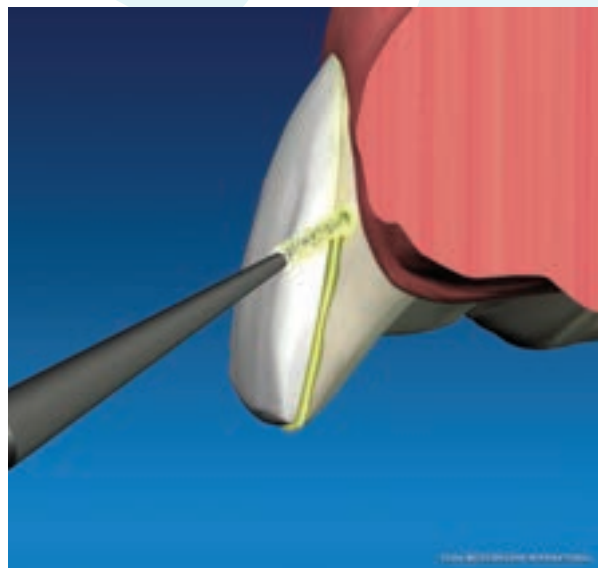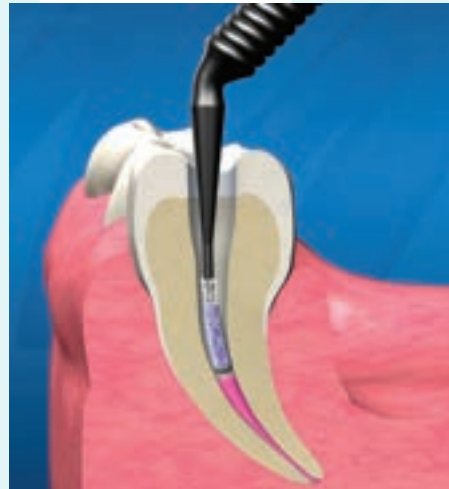

UltraBrush (Borstenapplikatoren)

Der Applikator UltraBrush wird in Form eines Kunststoffgriffs aus einer firmeneigenen Kombination aus Harzen und Farbstoffen gefertigt. Hauptmerkmale des Griffs sind eine Sollbruchstelle zur individuellen Anpassung der Länge, ein biegsamer Teil für schwer zugängliche Stellen und verbesserte ergonomische Eigenschaften. Die Spitze des Applikators besteht aus Nylonborsten, um Dentalprodukte wie Bleichmittel, Fluorid, Ätzmittel, Adhäsive, Dichtungsmittel, Desensibilisierungsmittel und Kunstharze aufzutragen.



Dispenser

Der Artikel wird in Verpackungseinheiten geliefert und ist versiegelt verpackt einzeln zu entnehmen.



Sichere Entsorgung

Im Zusammenhang mit der Entsorgung sind keine Vorsichtsmaßnahmen aufgrund besonderer, außergewöhnlicher Risiken zu treffen. Die Entsorgung kann gemäß den lokalen Vorschriften über den allgemeinen zahnmedizinischen Abfall erfolgen. Der Artikel erfordert keine besonderen Lagerbedingungen.

Hinweis

Microbrush-Applikatoren sind als Einwegprodukte konzipiert. Mehrmalige Verwendung kann die Leistung beeinträchtigen. Noch wichtiger ist, die Wiederverwendung eines Applikators kann dazu führen, dass Mikroben in den Körper des Patienten gelangen, denn der Applikator könnte bei der ersten Verwendung kontaminiert worden sein. Dies könnte sich negativ auf die Gesundheit des Patienten auswirken.

Dies ist ein Einwegprodukt. Nach einmaliger Verwendung ordnungsgemäß entsorgen. Wenn ein Einwegprodukt wiederverwendet wird, kann die Reinigung, Dekontaminierung, Sterilisierung oder deren Fehlen zu Kreuzinfektionen, Veränderungen und/oder Schädigungen des Gerätematerials sowie zur Absorption und Auswaschung von Reinigungs- oder Dekontaminationsmitteln führen.

Hinweise oder Vorsichtsmaßnahmen

Dieser Artikel kann unter Berücksichtigung der Kenntnisse und des Fachwissens potenzieller Benutzer ohne besondere Hinweise oder Vorsichtsmaßnahmen sicher verwendet werden.

Kontraindikationen:

Keine.

Melden Sie jede ernste Verletzung im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Vorfall ereignet hat.


Nur für den professionellen Gebrauch. Nicht für Privatpersonen erhältlich.

REF	MRG400 MRB400 MRS400 MRP400 MFP400 MFY400 MSF400 MUT400	MUO400 MFA400 MPD MPX MRA400 PF100PI PF100YE PR100BL	PR100GR PR100PE PR100PU PSF100 PF400 PF400-KIT PF400PI PF400YE	PR400 PR400BL PR400GR PR400-KIT PR400PE PR400PU PSF400 PSF400-KIT	PU400OR PU400TE PX100 WMFP100 WMFP100-S WMFY100 WMFY100-S WMRB100	WMRB100-S WMRPU100 WMRPU100-S WMSF100 WMSF100-S U1D U2D	U1R200 U2R200 292724 292725
-----	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

 Microbrush® International
1376 Cheyenne Ave
Grafton, WI 53024 USA

www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Hergestellt in den USA

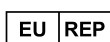

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany



MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau Switzerland



Medizinisches Gerät



Verantwortliche Person im
Vereinigten Königreich
MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Manchester M22 4DB
United Kingdom



Nur zum einmaligen Gebrauch



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland

8455.3
2026.01.31



Applicatori Microbrush - Istruzioni per l'uso

USO PREVISTO:

Gli applicatori Microbrush sono dispositivi medici monouso il cui utilizzo è previsto in ambito dentistico. Gli applicatori vengono utilizzati nel corso di procedure dentistiche di vario tipo, per l'applicazione di una quantità controllata di materiale in aree di difficile accesso all'interno della cavità orale.



Microbrush (Dimensione Ultrasottile, Dimensione Supersottile, Dimensione Sottile e Dimensione Regolare)

Il Microbrush assume la forma di un manico di plastica composto da una combinazione proprietaria di resine e coloranti. Le caratteristiche distintive del manico includono una porzione che è possibile staccare in base alla preferenza dell'utente, una porzione per la presa con scanalature per una presa migliore dell'utente e una porzione curvata per facilitare l'accesso a spazi ristretti e per una migliore ergonomia. La punta del pennello include ciuffi di nylon non assorbente di varie dimensioni fatti aderire ad una punta sferica per l'applicazione di vari prodotti dentistici. Il Microbrush può essere utilizzato per l'applicazione e la rimozione di materiali quali resine, cementi, mordenzanti, agenti leganti, fluoruro, soluzioni antiemofiliche e condizionatori.

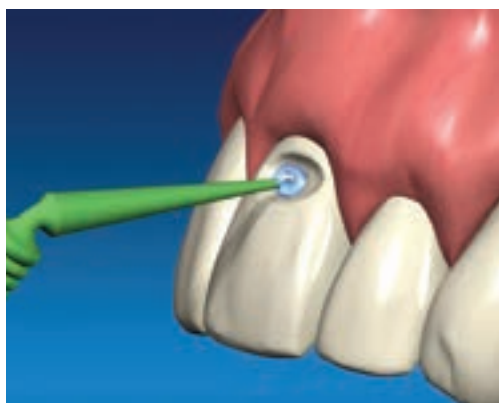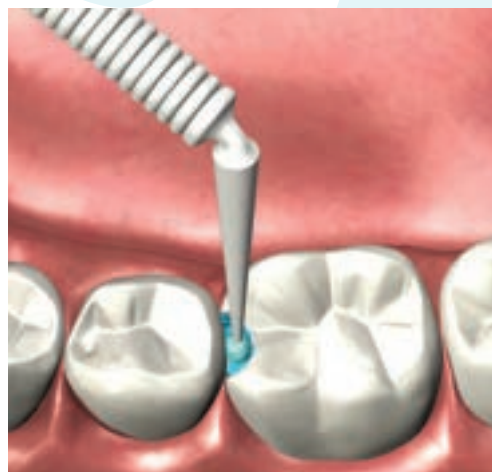



Microbrush originale (Dimensione Supersottile, Dimensione Sottile e Dimensione Regolare)

Il Microbrush originale assume la stessa forma del Microbrush descritto sopra. L'unica differenza rispetto al Microbrush standard consiste nel fatto che il manico non include una parte che si può staccare. Il Microbrush originale può essere utilizzato per l'applicazione e la rimozione di materiali quali resine, cementi, mordenzanti, agenti leganti, fluoruro, soluzioni antiemofliche e condizionatori.

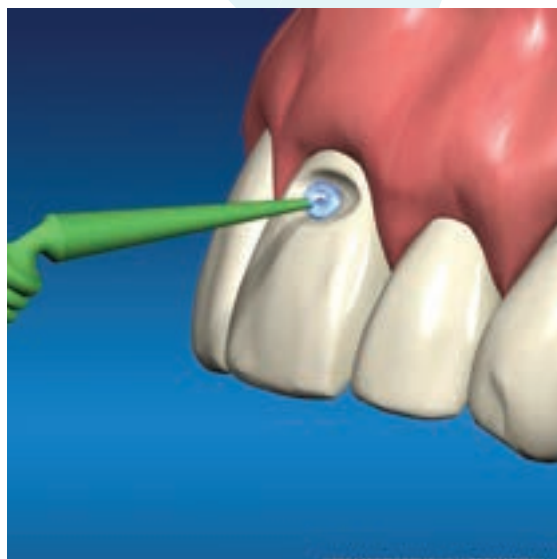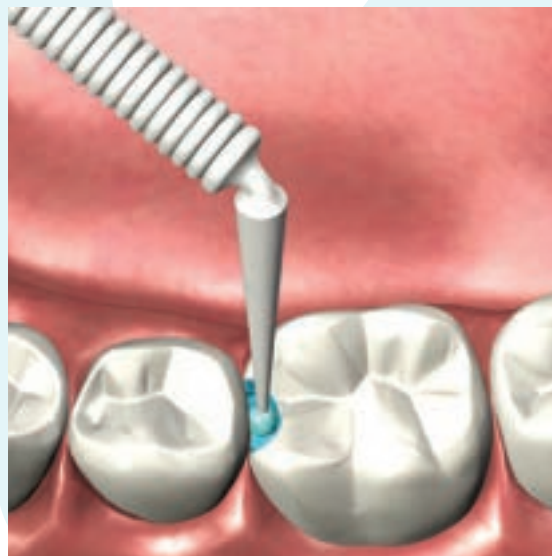

Microbrush X

Il Microbrush X assume la stessa forma del Microbrush descritto sopra. L'unica differenza dal Microbrush standard consiste nel fatto che le fibre di nylon vengono fatte aderire con un'estensione superiore per tutta la lunghezza della punta, per applicazioni di portata estesa. Il Microbrush X è destinato all'uso in trattamenti di bonding dentale, cementazione inlay/onlay e aree al di sotto del bordo gengivale.

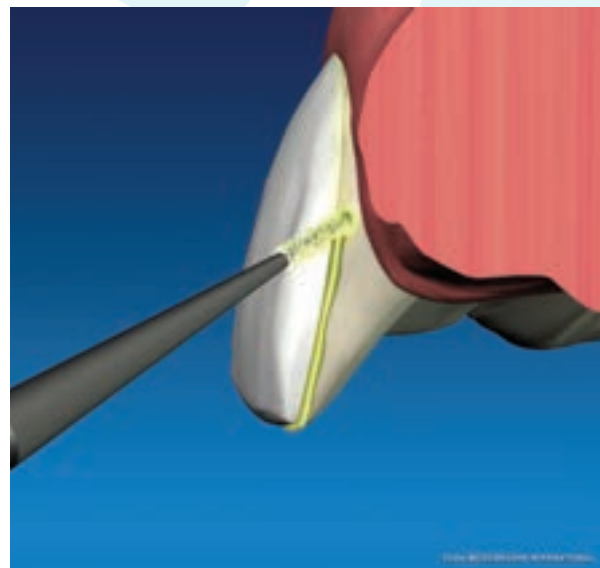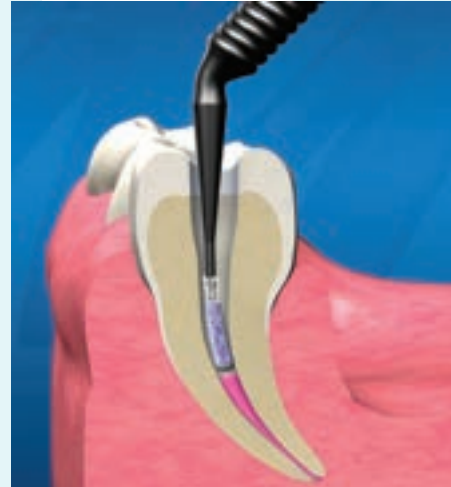

UltraBrush (Pennelli a setole dure)

L'UltraBrush è un applicatore con manico in plastica composto da una combinazione proprietaria di resine e coloranti. Le caratteristiche distintive del manico includono una porzione che si può staccare in base alla preferenza dell'utente, una porzione piegata per l'accesso a spazi ristretti e una migliore ergonomia. La punta del pennello è formata da setole di nylon per l'applicazione di prodotti dentistici quali agenti sbiancanti, fluoruro, mordenzanti, agenti leganti, sigillanti, desensibilizzanti e resine.



Dispenser

Il dispositivo è confezionato in gruppi ed erogato singolarmente da uno sigillato.



Smaltimento sicuro

Non è necessario adottare alcuna precauzione rispetto a rischi eventuali ed insoliti relativi allo smaltimento sicuro del dispositivo. Lo smaltimento secondo le normative locali potrebbe essere effettuato tramite i rifiuti dentistici generici. Questo dispositivo non richiede particolari condizioni di immagazzinamento.

Attenzione

Gli applicatori Microbrush sono progettati come prodotto monouso, se un applicatore dovesse essere utilizzato più di una volta, è possibile che le prestazioni del dispositivo peggiorino. Soprattutto, il riutilizzo di un applicatore può portare all'introduzione di microbi nell'organismo, a causa del riutilizzo di un applicatore che potrebbe essere stato contaminato durante il primo utilizzo, il che può causare un successivo deterioramento della salute del paziente.

Si tratta di un prodotto smaltibile. Smaltire adeguatamente dopo l'uso. Se si riutilizza un dispositivo monouso, la pulizia, la decontaminazione, la sterilizzazione del dispositivo, o la mancanza delle stesse, possono provocare infezione incrociata, alterazioni e/o degrado del materiale e delle funzioni meccaniche del dispositivo, nonché l'assorbimento e la lisciviazione di detergenti e decontaminanti.

Avvertenze e precauzioni

Questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza, senza particolari avvertenze o precauzioni, tenendo conto dell'addestramento e delle conoscenze dei potenziali utenti.

Controindicazioni:

Nessuna.

Segnalare qualsiasi lesione grave in relazione al presente dispositivo al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.

Solo per uso professionale. Non disponibile al pubblico.

REF	MRG400 MRB400 MRS400 MRP400 MFP400 MFY400 MSF400 MUT400	MUO400 MFA400 MPD MPX MRA400 PF100PI PF100YE PR100BL	PR100GR PR100PE PR100PU PSF100 PF400 PF400-KIT PF400PI PF400YE	PR400 PR400BL PR400GR PR400-KIT PR400PE PR400PU PSF400 PSF400-KIT	PU400OR PU400TE PX100 WMFP100 WMFP100-S WMFY100 WMFY100-S WMRB100	WMRB100-S WMRPU100 WMRPU100-S WMSF100 WMSF100-S U1D U2D	U1R200 U2R200 292724 292725
-----	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

 Microbrush® International
1376 Cheyenne Ave
Grafton, WI 53024 USA

www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Fabbricato negli USA



EU REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany



CH REP
MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau Switzerland



Dispositivo medico

UK CA Responsabile nel Regno Unito
MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Manchester M22 4DB
United Kingdom



Esclusivamente monouso

 Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland

8455.3
2026.01.31



Instrucciones de uso de los aplicadores Microbrush

USO PREVISTO:

Los aplicadores Microbrush son dispositivos médicos de un solo uso diseñados para ser utilizados en un entorno dental. Los aplicadores se utilizan durante diversos tipos de procedimientos dentales para la aplicación de una cantidad controlada de material en áreas de difícil acceso dentro de la cavidad oral.


Microbrush (tamaños Ultrafino, Superfino, Fino y Regular)

El Microbrush tiene la forma de un mango de plástico y está compuesto por una combinación exclusiva de resinas y colorantes. El mango tiene una parte que se puede desmontar según la preferencia del usuario, una parte estriada para un mejor agarre, y una sección flexible para acceder a espacios estrechos y mejorar la ergonomía. La punta del cepillo contiene fibras de nailon no absorbente de varios tamaños adheridas a una punta esférica para aplicar diversos productos dentales. El Microbrush se puede usar para aplicar y retirar materiales como resinas, cementos, productos de grabado, agentes de adhesión, flúor, soluciones hemostáticas y acondicionadores.

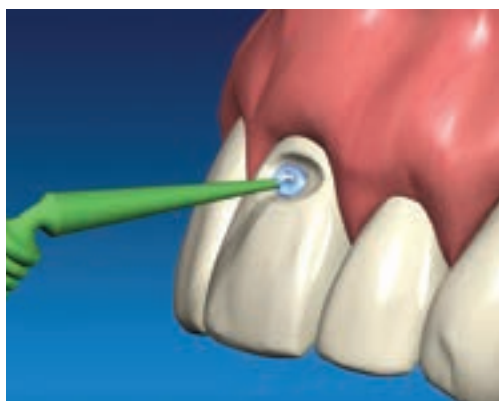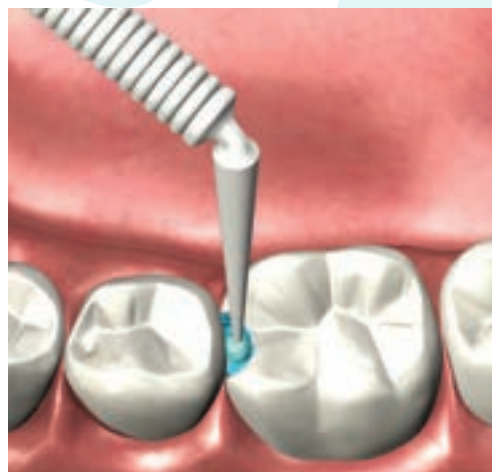



Microbrush Original (tamaños Superfino, Fino y Regular)

El Microbrush Original tiene la misma forma que el Microbrush indicado más arriba. La única diferencia respecto al Microbrush estándar es que el mango no tiene una parte desmontable. El Microbrush Original se puede usar para aplicar y retirar materiales como resinas, cementos, productos de grabado, agentes de adhesión, flúor, soluciones hemostáticas y acondicionadores.

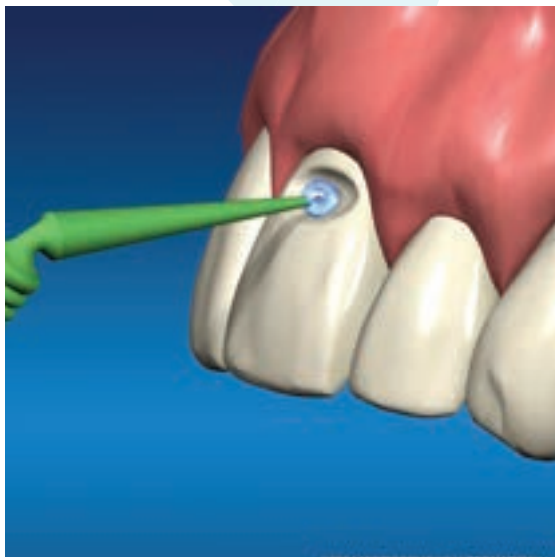

Microbrush X

El Microbrush X tiene la misma forma que el Microbrush indicado más arriba. La única diferencia con el Microbrush estándar es que las fibras de nailon están adheridas y se extienden más a lo largo de la punta, lo que permite aplicaciones de mayor alcance. El Microbrush X está diseñado para utilizarse en la adhesión de postes, cementación de incrustaciones/onlays, y áreas periodontales/subgingivales.

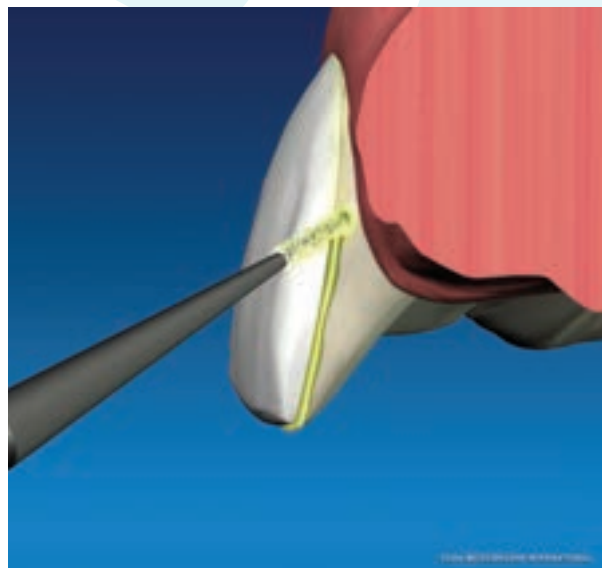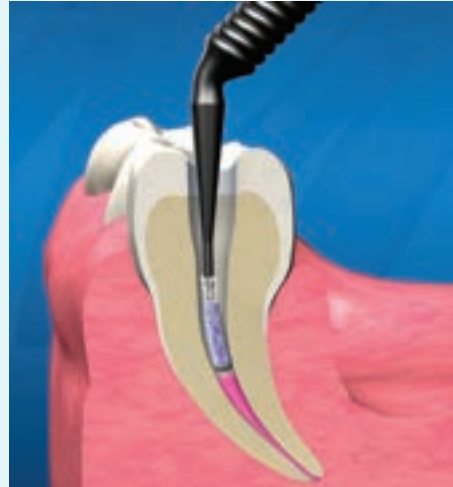

UltraBrush (cepillos de cerdas)

El UltraBrush es un aplicador con mango de plástico compuesto por una combinación exclusiva de resinas y colorantes. El mango tiene una parte que se puede desmontar según la preferencia del usuario, una parte flexible para acceder a espacios reducidos y una ergonomía optimizada. La punta del cepillo está hecha con cerdas de nailon para aplicar productos dentales como agentes blanqueadores, flúor, productos de grabado, agentes de adhesión, selladores, desensibilizantes y resinas.



Dispensador

El dispositivo viene empaquetado en grupos y se dispensa de forma individual desde un envase sellado.



Desecho seguro

No es necesario tomar precauciones contra riesgos especiales o inusuales relacionados con el desecho del dispositivo. El desecho conforme a las normativas locales puede hacerse a través de los desechos dentales generales. Este dispositivo no necesita condiciones especiales de almacenamiento.

Atención

Los aplicadores Microbrush están diseñados como productos de un solo uso; si un aplicador se utiliza más de una vez, es posible que el rendimiento del dispositivo se deteriore. Más importante aún, la reutilización de un aplicador puede causar la introducción de microbios en el cuerpo debido al uso repetido del aplicador, que podría haberse contaminado durante su primer uso, lo que puede provocar un deterioro posterior de la salud del paciente.

Este producto es desechable. Se debe desechar de forma adecuada después de un solo uso. Si se vuelve a usar un producto de un solo uso, la limpieza, la descontaminación, la esterilización del producto (o la ausencia de estas) pueden causar una infección cruzada, alteraciones y/o degradación del material y la función mecánica del dispositivo, así como la absorción y la filtración de agentes de limpieza o descontaminantes.

Advertencias y precauciones

Este dispositivo puede usarse de manera segura sin advertencias o precauciones especiales, teniendo en cuenta la formación y los conocimientos de los usuarios potenciales.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Comunique cualquier lesión grave con relación a este dispositivo al fabricante y a la autoridad competente en el Estado miembro en el que haya tenido lugar el incidente.

Solo para uso profesional. No disponible para el público general.

REF	MRG400 MRB400 MRS400 MRP400 MFP400 MFY400 MSF400 MUT400	MUO400 MFA400 MPD MPX MRA400 PF100PI PF100YE PR100BL	PR100GR PR100PE PR100PU PSF100 PF400 PF400-KIT PF400PI PF400YE	PR400 PR400BL PR400GR PR400-KIT PR400PE PR400PU PSF400 PSF400-KIT	PU4000R PU400TE PX100 WMFP100 WMFP100-S WMFY100 WMFY100-S WMRB100	WMRB100-S WMRPU100 WMRPU100-S WMSF100 WMSF100-S U1D U2D	U1R200 U2R200 292724 292725
-----	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

 Microbrush® International
1376 Cheyenne Ave
Grafton, WI 53024 USA

www.younginnovations.com
(800) 325-1881

Fabricado en EE. UU.



EU REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany



CH REP

MDSS CH GmbH
Laurenzenvorstadt 61
5000 Aarau Switzerland



Dispositivo médico



Persona responsable
en el Reino Unido
MDSS-UK RP Ltd.
Parkway House, Palatine Rd,
Northenden, Manchester M22 4DB
United Kingdom



Para un solo uso



Young Microbrush Ireland Ltd.
Clogherane, Dungarvan
Co. Waterford, X35 VE02, Ireland

8455.3
2026.01.31